



Busch®

There is no substitute for quality

Diamantschleifer Diamond instruments

mit passiver
Sicherheit
with passive
safety

... für Risikopatienten
... for high-risk patients

Die Diamantschleifer der Serie **TOP GRIP**, **SIDE GRIP** und **KR-Version** gehören zu den Instrumenten mit passiver Sicherheit.

Alle Instrumente überzeugen durch intelligente, spezifische Eigenschaften, die eigens für Risikopatienten entwickelt wurden und unverzichtbar für eine schonende Behandlung sind.

Besonders bei der Behandlung von Diabetikern ist es ein primäres Ziel, jegliche Behandlungen verletzungsfrei durchzuführen.

The diamond grinders **TOP Grip**, **SIDE Grip** and **KR-Version** are products with passive safety.

All instruments have intelligent, specific properties that have been specially developed for high-risk patients and are indispensable for gentle treatment.

Especially for diabetics, it is a primary goal to perform any treatment injury-free.



TOP Grip

SIDE Grip

KR-Version



TOP Grip



- diamantierte Stirnseite
- Sicherheitsfase
- z.B. sicheres Kürzen von Nägeln
- diamond-coated face
- safety bevel
- e.g. safe shortening of nails



Vor allem bei krankheitsbedingten Nagelveränderungen können mit den individuellen TOP Grip Formen Überstehende Nagelränder sicher gekürzt oder deformierte Nagelplatten gezielt reduziert und angeglichen werden.

Neben der bewährten zylindrischen Grundform 840T bieten wir mit der kleiner dimensionierten Form 841T die Möglichkeit zur filigraneren Behandlung. Mit der Form 828T reduzieren Sie mit der diamantierten TOP-Fläche unnatürlich deformierte und überstehende Nägel im Front- und Seitenbereich mit mehr Übersicht und die konkave glatte, sichere Seitenfläche passt sich der vorderen und seitlichen Hautkontur an. Die Form 805T mit gerader glatter Seitenfläche legt sich beim Reduzieren von seitlichen Nagelflächen stützend an den Nagelwall.

Diese filigranen Formen bieten dem Fußpfleger / Podologen mehr Bewegungsfreiheit.


Grundsätzlich empfehlen wir in der Trockentechnik die Drehzahlen herabzusetzen, ebenso bei der Behandlung von Hoch-Risikopatienten.

By changes on infected nails the individual TOP GRIP form can shorten the overlying nail edges safer or deformed nail plates can be selectively reduced and adapted accordingly.

Besides the approved cylindrical basic shape 840T we offer the small-sized shape 841T with the option to do filigree treatments. With the shape 828T with diamond coated TOP-Surface unnaturally deformed nails and the overlying nail in front and side areas can be reduced with a better overview and the concave safe smooth side surface fits on front and on sides of the skin contour. The shape 805T with a straight smooth surface lies supporting on the nail wall while reducing nail surface on the sides of the nails.

Basically these filigree shapes offer pedicurists/podiatrists more room to operate.

Generally we recommend a decrease of rotation in the dry technique and also by treatments on high-risk patients.

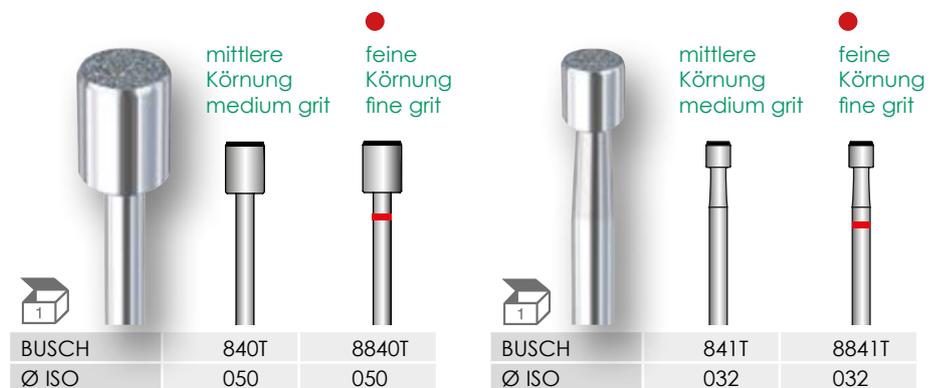

SIDE Grip



Sicherheitsfase
Safety bevel

- diamantierte Seitenfläche
- Sicherheitsfase
- für schonendes Nagelglätten und Beschleifen von Hornhaut.

- diamond-coated Side surface
- safety bevel
- e.g. flat removal of callus or nails

Mit den individuellen SIDE Grip Formen können zielgenau und individuell die entsprechenden Hautpartien und vor allem krankheitsbedingte Nagelveränderungen beschliffen werden. Ungewollte Schleifkontakte werden durch die glatte Stirnfläche verhindert.

Neben den bewährten zylindrischen und konischen Grundformen, bieten wir mit der kleiner dimensionierten zylindrischen Form 841S die Möglichkeit zur filigraneren Behandlung. Die diamantierte konische SIDE-Fläche der Form 805S bietet z.B. den Vorteil, Verhornungen im vorderen und seitlichen Nagelrandbereich sicher zu beschleifen.

Grundsätzlich empfehlen wir in der Trockentechnik die Drehzahlen herabzusetzen, ebenso bei der Behandlung von Hoch-Risikopatienten.

Foremost by changes on infected nails and on certain skin parts the individual SIDE GRIP shape can pinpoint individually the areas to be treated or rather to be abraded. Unintentional sliding contacts are avoided by the smooth frontal area.

We offer besides the approved cylindrical and conical basic shape also the small dimensioned cylindrical shape 841S with the option to do filigree treatments. The diamond coated conical SIDE-surface of the shape 805S offers the advantage e.g. to abrade cornification safer in the front and on the sides of the nail edges.

Generally we recommend a decrease of rotation in the dry technique and also by treatments on high-risk patients.

● grobe Körnung
coarse grit

BUSCH	6840LS
Ø ISO	065

● mittlere Körnung
medium grit

BUSCH	840S	841S	854S	854S	840LS	805S
Ø ISO	055	035	033	040	065	065

● feine Körnung
fine grit

BUSCH	8840S	8841S	8805S
Ø ISO	055	033	065

KR-Version

abgerundete Kante
rounded edge



Alle Instrumente der KR-Version haben abgerundete Kanten am oberen Rand des Arbeitsteils. So können schonende Behandlungen von Risikopatienten vorgenommen werden, ob beim Nagelglätten oder dem Entfernen von Hornhaut.


Neben den bewährten zylindrischen Grundformen bieten wir mit der kleiner dimensionierten zylindrischen Form 841KR die Möglichkeit zur filigraneren Behandlung. Die konische Variante 854KR führen wir in zwei Größen, so dass je nach Anwendung und Nagelgröße immer das passende Instrument zur Verfügung steht.

Grundsätzlich empfehlen wir in der Trockentechnik die Drehzahlen herabzusetzen, ebenso bei der Behandlung von Risikopatienten.

The upper edge of the working part is rounded on all instruments of version KR. This ensures gentle treatment of high-risk patients, whether when smoothing nails or removing callus.

In addition to the time-proven cylindrical basic shapes, we are offering the smaller cylindrical shape 841KR for more delicate treatments. We offer the conical version 854KR in two sizes, so that the right instrument is always available depending on the application and nail size.

Generally we recommend a decrease of rotation in the dry technique and also by treatments on high-risk patients.

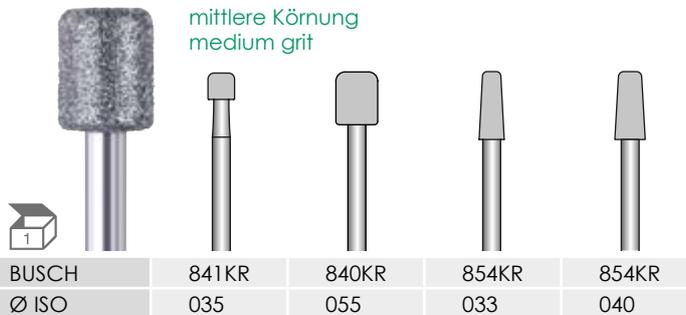

- abgerundete Kante
- schonende Behandlung
- sicheres Nagelglätten oder Entfernen von Hornhaut
- rounded edge
- gentle treatment
- safe nail smoothing or removal of callus



 = Verpackungseinheit / Package unit

Bitte beachten Sie unsere Sicherheits-, Gebrauchs- und Hygiene-Empfehlungen unter www.busch.eu
For safety, usage and hygiene recommendations please refer to our website www.busch.eu

CE 0124



BUSCH & CO. GmbH
& Co. KG
Unterkaltenbach 17-27
51766 Engelskirchen
GERMANY

www.busch.eu
mail@busch.eu
Tel.: +49 2263 86-0
Fax: +49 2263 20741



BFLA1/01/2022