

Corta-coronas

6880Z



36RD1



Dos para todas las situaciones

Si necesita mecanizar metales diversos, óxido de circonio o cerámica de recubrimiento, con nuestros corta-coronas de carburo y los instrumentos ZIRAMANT estará óptimamente equipado para hacer frente a cualquier situación.


Mientras que los instrumentos Ziramant, gracias a su grano especial, son capaces de modelar a placer un material tan resistente como el óxido de circonio, los corta-coronas de carburo le permitirán mecanizar con facilidad todo tipo de metales.

Las fresas de carburo con dentado diamante BUSCH destacan especialmente por su aplicación universal, la suavidad de su funcionamiento y un guiado seguro, ventajas que se combinan con una excepcional velocidad de corte.



Busch®


There is no substitute for quality

empleo	metales non-preciosos y sus aleaciones	aleaciones de metales preciosos con alto contenido de oro	aleaciones de metales preciosos con bajo contenido de oro	Cerámica de recubrimiento sobre estructura metálica	óxido de zirconio + y pura-cerámica	Recomendación de velocidad
corta-coronas de carburo con dentado cruzado BUSCH 21RX und 23RX		●	●			180.000 - 200.000 min ⁻¹
corta-coronas de carburo con corte transversal fino BUSCH 34, 36R und 38R	●					
corta-coronas de carburo con dentado „diamante“ BUSCH 34D, 36RD, 38RD, 36RDL, 38RDL	●	●	●	●		
ZIRAMANT- corta-coronas 6880Z, 6855Z 					●	140.000 - 160.000 min ⁻¹

Para cortar la cerámica de recubrimiento puede utilizarse alternativamente un instrumento diamantado de grano grueso.

Carburo • Corta-coronas


con dentado cruzado

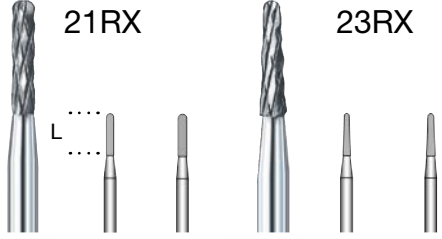

21RX **23RX**

BUSCH	21RX	21RX	BUSCH	23RX	23RX
ISO Ø	010	012	ISO Ø	010	012
L mm	5,6	5,6	L mm	5,6	5,6

con corte transversal fino



34 **36R** **38R**

BUSCH	34	34	BUSCH	36R	36R	BUSCH	38R	38R
ISO Ø	010	012	ISO Ø	010	012	ISO Ø	010	012
L mm	2,0	2,0	L mm	4,0	4,5	L mm	4,0	4,5

con dentado diamante

una corta parte del proceso



34D **36RD** **38RD**

BUSCH	34D	34D	BUSCH	36RD	36RD	BUSCH	38RD	38RD
ISO Ø	010	012	ISO Ø	010	012	ISO Ø	010	012
L mm	2,0	2,0	L mm	4,0	4,5	L mm	4,0	4,5


parte central de trabajo



36RDL **38RDL**

BUSCH	36RDL	36RDL	BUSCH	38RDL	38RDL
ISO Ø	010	012	ISO Ø	010	012
L mm	5,6	5,6	L mm	5,6	5,6

ZIRAMANT-Corta-coronas



6880Z **6855Z**

BUSCH	6880Z	BUSCH	6855Z
ISO Ø	014	ISO Ø	014
L mm	6,0	L mm	6,0

CE 0124

Rogamos que observen nuestras recomendaciones de seguridad, uso e higiene en www.busch.eu



BUSCH & CO. GmbH & Co. KG
 Unterkaltenbach 17-27
 51766 Engelskirchen
 GERMANY

www.busch.eu
mail@busch.eu
 Tel.: +49 2263 86-0
 Fax: +49 2263 20741

