



Rusch®

There is no substitute for quality

# Hybrid TWISTER spitz/pointed

Patent: DE 10 2014 010 033

Unser Experte für besondere Fälle  
Our expert for special cases



HT852/115

Bearbeiten Sie flächig Hornhaut sowie Rhagaden, partielle lokale Verhornungen z.B. an Zehenkuppen und Hühneraugen mit nur einem Instrument.

Durch die Besonderheit dieser neuen Form - langes, paralleles Arbeitsteil mit Spitze - ist die Arbeit an Flächen und in Zwischenräumen gleichermaßen möglich.

Das erleichtert den Behandlungsablauf, reduziert den Instrumentenwechsel und damit auch den Wiederaufbereitungsaufwand.

Remove large callus as well as rhagades, localised callus (e.g. on the tips of the toes) and corns with a single instrument.

The special feature of this Twister shape - the long, parallel head with a tapered tip - allows you to work both on larger areas and between the toes.

This makes the treatment process easier, and reduces both the need to change instruments and the time spent on device reprocessing.



2 in 1

## Der Multifunktionale The multifunctional

**TWISTER-Konstruktion:** Schlitze optimieren die Spraykühlung bzw. Absaugleistung

**TWISTER design:** Slits optimise spray cooling resp. extraction power

**Patentierter Hybridkörnung:** Keramik- und Diamantkörnung für signifikant hohe Abtragsleistung und glatte Oberflächen

**patented hybrid grit:** Ceramic and diamond grit for significantly enhanced abrasion performance and smooth surfaces

**Einteilige Fertigung** gewährleistet optimale Rundlaufeigenschaften

**one-piece production** ensures optimum concentricity properties

Farbring kennzeichnet die Körnungs-Art  
coloured ring indicates grit type

**Punktuell** Hornhaut- und Hühneraugenentfernung  
**precise** removal of callus and corns


Behandlung/Ausschleifen tiefer Rhagaden  
treatment/filing of deep rhagades

Behandlung/Ausschleifen flacher Rhagaden  
treatment/filing of shallow rhagades

**Langes paralleles Arbeitsteil** zur flächigen Hornhautentfernung

**long parallel working part** for wide-area callus removal

Weißer Ring zur Identifizierung der Hybridkörnung  
white ring to identify hybrid grit

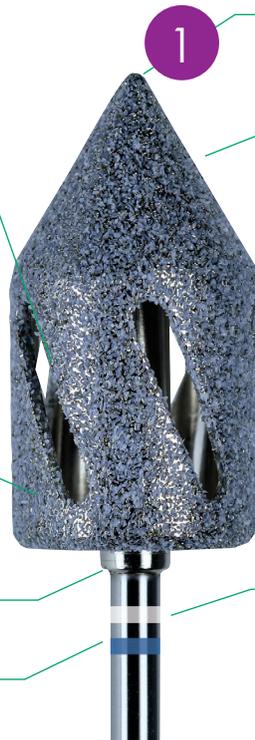


○● **grobe Hybridkörnung**  
Abtrag dicker Hornschwielen  
Bearbeiten von Rhagaden

**coarse grit**  
removal of thick callus  
for treatment of rhagades



○● **mittlere Hybridkörnung**  
Entfernung starker Verhornungen  
Bearbeiten von Rhagaden

**medium grit**  
removal of hard callus  
for treatment of rhagades

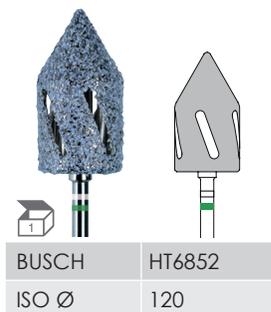

CE 0124

Als Medizinprodukt können Hybrid TWISTER sowohl in der Trockentechnik als auch in der Nasstechnik eingesetzt und problemlos in den Wiederaufbereitungsprozeß eingegliedert werden.

The Hybrid TWISTER is a medical device that can be used with both the dry and wet technique and can be easily integrated into the device reprocessing workflow.

Bitte beachten Sie unsere Sicherheits-, Gebrauchs- und Hygiene-Empfehlungen unter [www.busch.eu](http://www.busch.eu)  
For safety, usage and hygiene recommendations please refer to our website [www.busch.eu](http://www.busch.eu)



**BUSCH & CO.** GmbH & Co. KG  
Unterkaltenbach 17-27  
51766 Engelskirchen  
GERMANY

[www.busch.eu](http://www.busch.eu)  
mail@busch.eu  
Tel.: +49 2263 86-0  
Fax: +49 2263 20741



BFLA1/022022