



**Busch**<sup>®</sup>

There is no substitute for quality

# KERA

Tout en blanc !  
¡Blanco inmaculado!




Huit nouvelles formes délicates **tout en céramique** viennent compléter l'actuelle série KERA; pour un traitement tout en douceur et un travail d'une extrême précision, avec une vue d'ensemble optimale. La céramique haute performance blanche spéciale ; un matériau de pointe pour les instruments rotatifs de la classe BUSCH Premium.

Ocho nuevas exquisitas formas de **cerámica pura** completan nuestra serie KERA: permiten un tratamiento cuidadoso y la configuración más precisa, además de ofrecer la mejor vista global.

La cerámica blanca especial de alto rendimiento: un material de alta tecnología para instrumentos rotatorios BUSCH de primera categoría.

Nouveau!  
Nuevo!



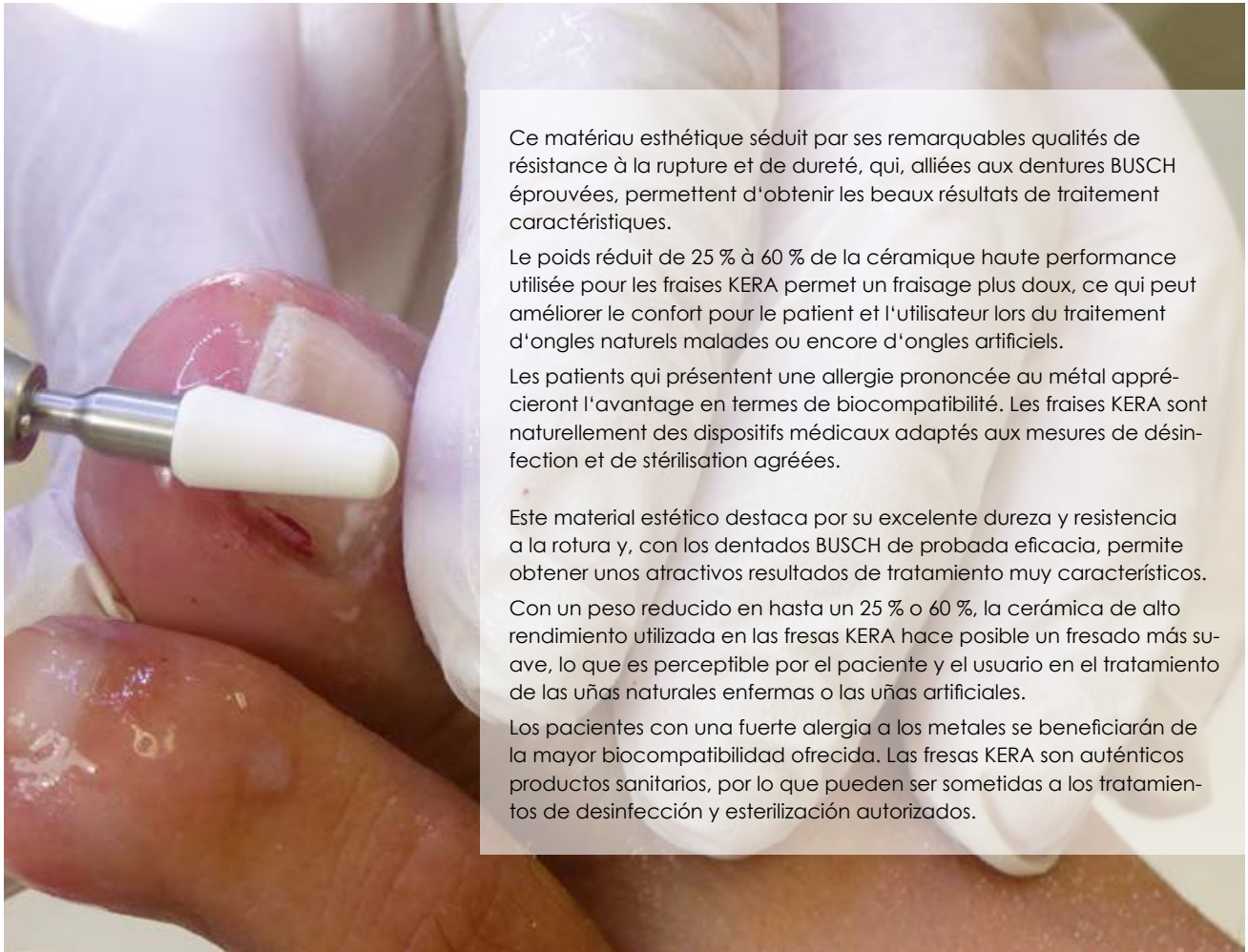

Ce matériau esthétique séduit par ses remarquables qualités de résistance à la rupture et de dureté, qui, alliées aux dentures BUSCH éprouvées, permettent d'obtenir les beaux résultats de traitement caractéristiques.

Le poids réduit de 25 % à 60 % de la céramique haute performance utilisée pour les fraises KERA permet un fraisage plus doux, ce qui peut améliorer le confort pour le patient et l'utilisateur lors du traitement d'ongles naturels malades ou encore d'ongles artificiels.

Les patients qui présentent une allergie prononcée au métal apprécieront l'avantage en termes de biocompatibilité. Les fraises KERA sont naturellement des dispositifs médicaux adaptés aux mesures de désinfection et de stérilisation agréées.

Este material estético destaca por su excelente dureza y resistencia a la rotura y, con los dentados BUSCH de probada eficacia, permite obtener unos atractivos resultados de tratamiento muy característicos.

Con un peso reducido en hasta un 25 % o 60 %, la cerámica de alto rendimiento utilizada en las fresas KERA hace posible un fresado más suave, lo que es perceptible por el paciente y el usuario en el tratamiento de las uñas naturales enfermas o las uñas artificiales.

Los pacientes con una fuerte alergia a los metales se beneficiarán de la mayor biocompatibilidad ofrecida. Las fresas KERA son auténticos productos sanitarios, por lo que pueden ser sometidas a los tratamientos de desinfección y esterilización autorizados.

### Denture SPEED,


avec sécurité passive, recommandée aux diabétiques

- pour les ongles épais
- utilisation universelle
- avec sécurité passive pour le gel et l'acrylique

### Dentado SPEED

con seguridad pasiva, recomendable para diabéticos




- para uñas hinchadas
- uso universal
- con seguridad pasiva para gel y acrílico

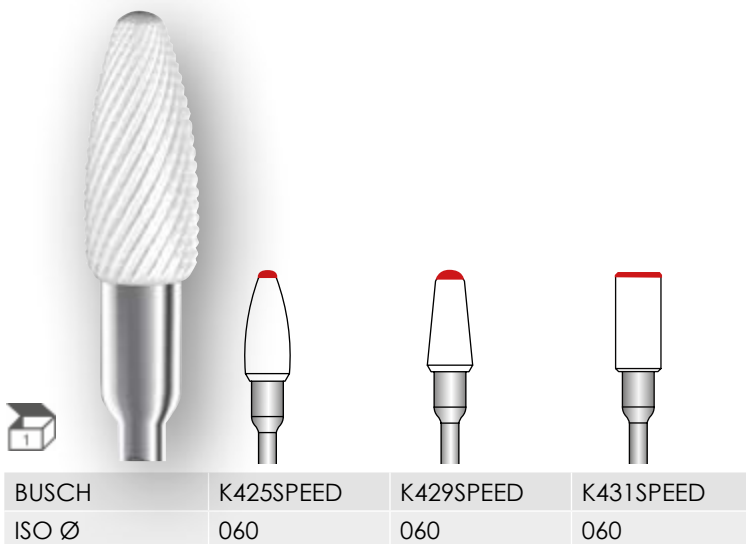

## Denture en X

avec puissance abrasive élevée



- pour façonner de manière ciblée les contours des ongles déformés ou atteints de mycoses
- avec une puissance abrasive élevée pour le gel

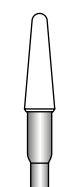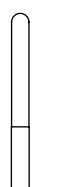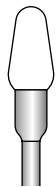

BUSCH	K424X	K424X	K425X	K426X	K429X
ISO Ø	040	060	060	023	040



N!

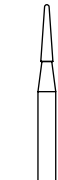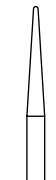

BUSCH	K429X	K432X	K433X	K433X
ISO Ø	060	023	016	023





N!

N!

N!

## Denture en X fine

- pour le travail de précision sur les ongles et la peau des ongles préalablement traités

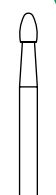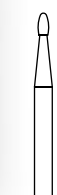

BUSCH	K423FX	K423FX
ISO Ø	014	023



N!

N!

## Dentado X fino

- para el tratamiento de precisión de uñas pretratadas y cutícula








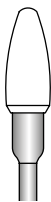
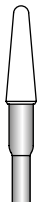
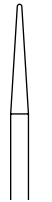
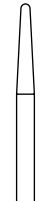
### Denture droite grossière avec coupe transversale

- pour les ongles hyperkératosiques et pour éliminer rapidement par fraisage les matières synthétiques des orthèses
- avec une puissance abrasive très élevée pour l'acrylique
- petites formes spécialement conçues pour les zones d'accès difficiles sur la peau et les sillons latéraux des ongles, ainsi que sous le bord des ongles.
- pour les callosités ponctuelles importantes, y compris entre les orteils

### Dentado grueso recto con corte transversal

- para uñas anormalmente hinchadas y el fresado rápido de resinas de órtesis
- con un poder de abrasión sumamente elevado para gel
- formas pequeñas especialmente adaptadas a las zonas de difícil acceso en la cutícula, el perioniquio y bajo el borde de la uña
- para cornificaciones fuertes puntuales, incluso entre los dedos de los pies



						
BUSCH	K424GQSR	K425GQSR	K429GQSR	K432GQSR	K433GQSR	K433GQSR
ISO Ø	060	060	040	023	023	023

N!

N!

CE 0124

 = Unité d'emballage / envase

Pour les recommandations de sécurité, d'utilisation et d'hygiène, nous vous invitons à consulter notre site internet [www.busch.eu](http://www.busch.eu)  
Rogamos que observen nuestras recomendaciones de seguridad, uso e higiene en [www.busch.eu](http://www.busch.eu)



**BUSCH & CO.** GmbH  
& Co. KG  
Unterkaltenbach 17-27  
51766 Engelskirchen  
GERMANY

[www.busch.eu](http://www.busch.eu)  
[mail@busch.eu](mailto:mail@busch.eu)  
Tel.: +49 2263 86-0  
Fax: +49 2263 20741



BFALO\_5/032022